

【かんたんガイド】SwitchBotBot_Eyeアプリ Ver1.1.0版

このアプリは、「Windows/パソコンの視線入力で、SwitchBotボットをタイマーONする」ために作ったツールです。
基本的にマウスポインターの操作で使えますので、視線入力だけでなくZonoやJINS ASSIST等によるヘッドトラッキング入力やポインティングデバイス(マウス、トラックパッド、トラックボール、ジョイスティック型マウスなど)に入力できればOKです。

1. 準備するもの


- (1) Windows/パソコン: 視線入力装置(Tobii Eye Tracker 5など)と視線マウスアプリが動いているもの。
※ 視線入力では使わないという場合、視線入力装置と視線マウスアプリは必要ありません。
※ 視線マウスアプリとは、EyeMoT Mouse、Mill Mouse、miyasuku EyeConLT2などのことです。
- (2) SwitchBotボット: 入力したいスイッチに固定しておきます。
- (3) Webカメラ: 必須ではありませんが、動かしたい家電品をユーザーに認識してもらいやすくなるので便利だと思います。
- (4) SwitchBotアプリをインストールしたスマートフォンとWi-Fi: 初期設定の時に必要です。
※ 初めてSwitchBot製品やSwitchBotアプリを使う方は、こちらのサイトを読んで設定しておきましょう。→

<https://bot-lab.tech/switchbot-howtouse/>



2. スマートフォンでSwitchBotボットのBluetooth用MACアドレスを調べます

- (1) SwitchBotボットのフタを開けてCR2電池を入れます。
- (2) スマートフォンのSwitchBotアプリを立ち上げて、使用するSwitchBotボットのBLE-MACを調べてメモしておきます。

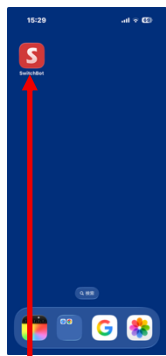

SwitchBotアプリをタップします



【デバイスを追加】をタップします



【ボット】をタップします




【ボットF4】→【次へ】をタップします



【次へ】をタップします




【次へ】をタップします

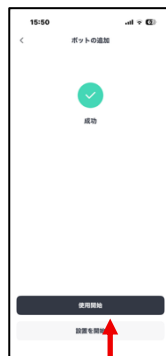

【使用開始】をタップします



【ボットF4】をタップします

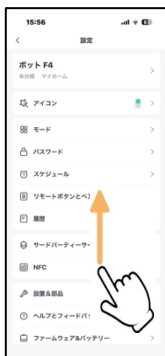

下から上にスクロールします



【デバイス情報】をタップします



BLE-MACの右に表示された
文字列をメモしておきます
例 → A0:E3:2C:4E:31:DE

3. 支援者が次の設定をします

アプリをダウンロードしましょう

- (1) [Git Hubのダウンロード先](#)から SwitchBotBot_Eye_Ver1.1.0.zip というzipファイルをダウンロードします。
- (2) ダウンロードした SwitchBotBot_Eye_Ver1.1.0.zip のアイコンを右クリックして、[すべて展開...]を左クリックすると、フォルダ『SwitchBotBot_Eye_Ver1.1.0』ができて、その中にアプリ SwitchBotBot_Eye.exe があります。
- (3) SwitchBotBot_Eye.exe をダブルクリックするとアプリが起動します。

アプリを使いましょう

(1) SwitchBotボットを探す

- ① 【🔍SwitchBotボットを探索】ボタンを左クリックします。
 - ・5秒ほどで自動的にSwitchBotボットを見つけます。
 - ・【🔍SwitchBotボットを探索】ボタンの右の文字が「スキャン待機中」→「スキャン中...」→「スキャン完了」になればOK。
- ② 【ペアリング:】の右にある枠の下向きV印を押して、2. (2)でメモしたBLE-MACと同じ文字列を探して左クリックします。
- ③ 【接続】ボタンを左クリックします。
 - ・【🔍SwitchBotボットを探索】ボタンの右の文字が「接続中...」→「接続完了」になればOK。

(2) カメラを選ぶ

ボットONボタン(オレンジ色の四角)に家電品が映るようにしたい時には「カメラ1」または「カメラ2」を選んでください。
※「カメラ」は外付Webカメラ(USB接続)、ノートパソコンのインカメラ、iVcamなどが自動で選ばれます。
※外付けWebカメラのみ使用したい場合は、Windowsの設定アプリから Bluetoothとデバイス>カメラ>接続済みカメラ
に表示される外付けWebカメラ以外のカメラを無効にしてください。

(3) 操作音の有無を選ぶ

SwitchBotボットがONになった時とOFFになった時に音が鳴ります。
音を鳴らしたくない場合は口を左クリックしてチェックマークをはずしてください。
※使用するWindowsパソコンの機種によっては音が鳴らないことがあります。

(4) 動作モードを選ぶ

① クリック/注視でタイマー実行

ボットONボタンの中でマウスクリックすれば、SwitchBotボットのアームが動いて下がりっぱなしになります。

② マウスオーバーでタイマー実行

マウスポインターがボタンの中に入った瞬間、SwitchBotボットのアームが動いて下がりっぱなしになります。
※視線入力装置と視線マウスアプリを使ってマウスポインターを視線で動かせば上記2つの動作モードが働きます。
※注視時間は視線マウスアプリで決めてください。
※①②でタイマーが実行されてSwitchBotボットがONになると**実行中〇秒**という文字がカウントダウン表示されます。
※動作モード①②はラジオボタンだけでなく、キーボードの[1][2]を押して切り替えることもできます。

(5) タイマー秒数を決める

スライダーを動かして1秒~180秒でタイマー設定した時間SwitchBotボットのアームが動いて下がりっぱなしになります。
※タイマー秒数を決めるためのスライダーは、キーボードの左右矢印キーでも動かせます。

(6) ボタンサイズを選んで適切な場所に配置する

ボットONボタン(オレンジ色の四角)はサイズが特大・大・中・小から選べて、マウスドラッグで配置場所が移動できます。

(7) 全画面表示とウィンドウ表示の切替ができます

キーボードの[F11キー]を押すと、全画面表示とウィンドウ表示を切り替えることができます。
※全画面表示でキーボードの[ESCキー]を押すとウィンドウ表示に替わります。(逆の操作はできません)



4. ユーザーが操作してみましょう

- 設定が終わったら、画面中央の**オレンジ色の四角形**がSwitchBotボットのアームを動かすボタンになります。
- ・SwitchBotボットのアームを動かす: オレンジ色の四角形のボタンの中にマウスポインターを動かしましょう。
 - ・ONのしるし: SwitchBotボットのアームが動くとオレンジ色の四角形のボタンの枠が **赤色** になります。